


**HARTMANN**




# Лечение на рани

Каталог

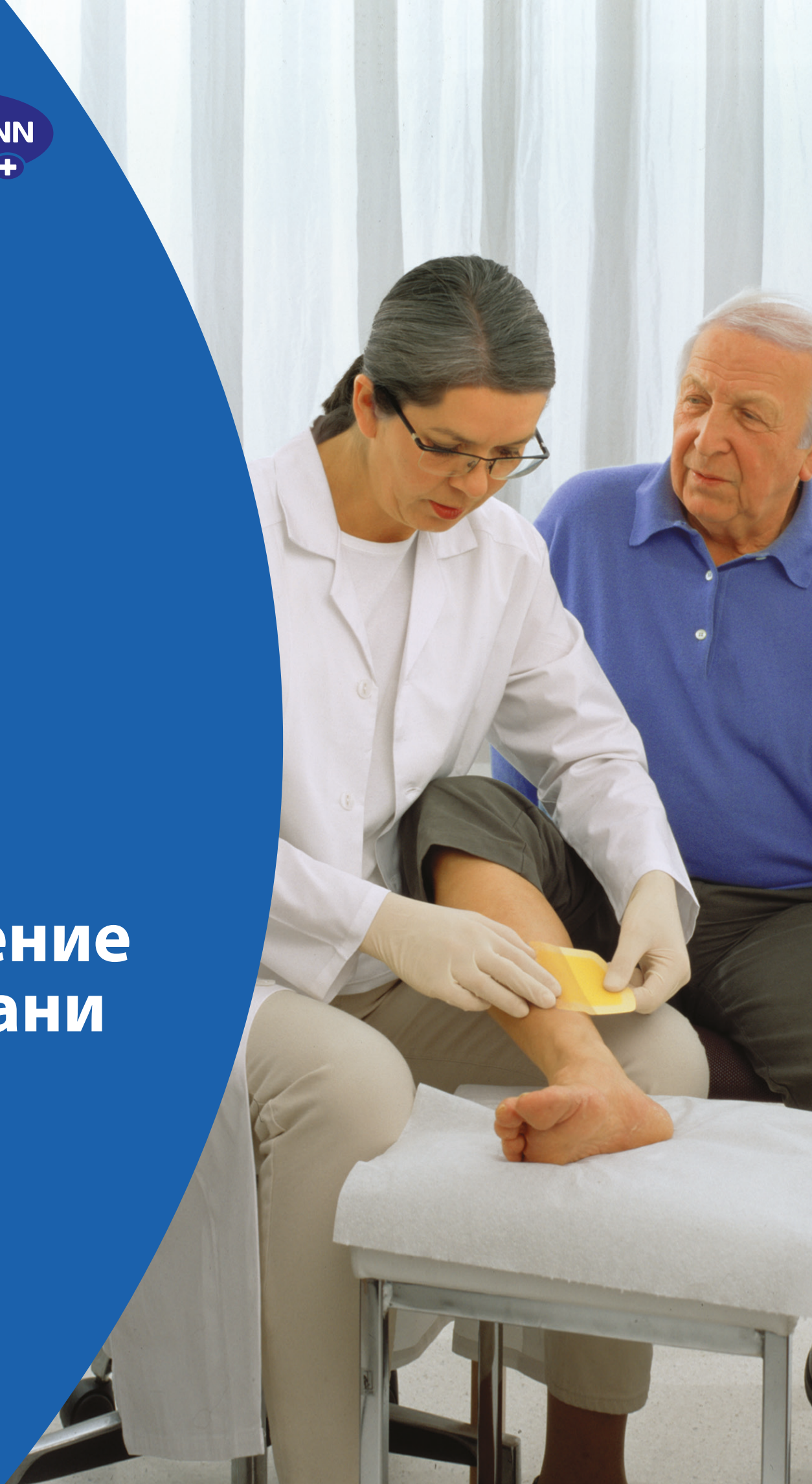



## Zetuvit Plus Silicone

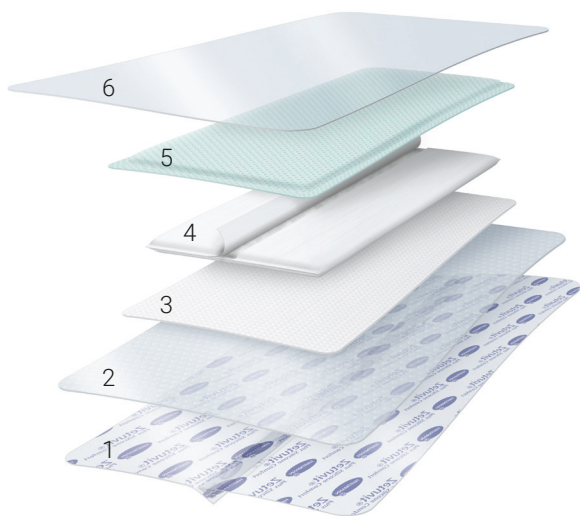

1. Предпазно фолио
2. Силиконов контактен слой + адхезивен кант (за модел border)
3. Хидрофилен нетъкан слой
4. Абсорбираща сърцевина от САП частици и целулозни нишки и дифузен слой, разпределящ ексудата
5. Зелена хидрофобна обвивка
6. Полу-пропусклив покривен филм

Стерилна превръзка със силиконов контактен слой, който позволява лесно приложение, поради моментното прикрепяне и почти безболезнена атрауматична смяна. Превръзката съдържа суперабсорбент частици (САП), които надеждно абсорбират и задържат раневия ексудат. Превръзката осигурява нежен омекотяващ ефект върху раната, а силиконовият слой не позволява залепяне към раната, което прави смяната комфортна за пациента. Горният слой е от водонепроницаем филм, позволяващ къпане.

**Приложение:** За средно до силно ексудирани остри (травматични, изгаряния, пост-оперативни) и хронични (улкуси, декубитуси, онко рани, диабетно стъпало) рани. Може да се прилага при компресивна терапия и да се комбинира с локални антисептици. Превръзката може да остане върху раната до 5 дни.

Моделът Zetuvit Plus Silicone border е снабден с адхезивен кант, който позволява надеждно прикрепяне и наблюдение на кожата около раната.



Наименование	Размер	Размер на подложката	Брой в опаковка	Каталожен номер
Zetuvit Plus Silicone	8 x 8 см	6 x 6 см	10 бр.	413 810
	12,5 x 12,5 см	10,5 x 10,5 см	10 бр.	413 820
	10 x 20 см	8 x 18 см	10 бр.	413 830
	20 x 20 см	18 x 18 см	10 бр.	413 840
	20 x 25 см	18 x 23 см	10 бр.	413 850
Zetuvit Plus Silicone border	10 x 10 см	5 x 5 см	10 бр.	413 910
	12,5 x 12,5 см	7 x 7 см	10 бр.	413 920
	17,5 x 17,5 см	11,5 x 11,5 см	10 бр.	413 930
	15 x 25 см	9 x 19 см	10 бр.	413 940
	20 x 25 см	14 x 19 см	10 бр.	413 950



1. Сърцевина от Суперабсорбент Полиакрилат (САП) частици
2. Специален филм, не позволяващ изпарение на влагата от превръзката
3. Хидрофобна обвивка с ясни надписи, указващи посоката на поставяне
4. Силиконови ивици против залепване към раната

Хидроактивна превръзка с уникален Почистващ и Абсорбиращ механизъм на действие и силно абсорбираща сърцевина, предварително активирана с разтвор на Рингер. В продължение на 72 часа този разтвор поддържа влажна среда в раната, спомага за размякването на некроза и мъртва тъкан и ги премахва чрез автолитичен дебридман.

Суперабсорбент Полиакрилат (САП) частиците, съдържащи се в сърцевината на превръзката надеждно абсорбират и задържат раневия ексудат и не позволяват повторна контаминация. Хидрофобната обвивка и специалното „спояване“ на ръбовете предпазват от изпарение на влагата.


**Приложение:** За лечение на трудноздравяващи рани със средна до обилна секреция; за инфектирани и/или хронични рани от различен произход.



Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер	Каталожен номер от 2022 г.
HydroClean Advance	ф 3 см	10 бр.	609 609	609 609
	ф 4 см	10 бр.	609 762	609 662
	ф 5,5 см	10 бр.	609 766	906 666
	4 x 8 см	10 бр.	609 764	609 664
	7,5 x 7,5 см	10 бр.	609 768	609 668
	10 x 10 см	10 бр.	609 772	609 672

HydroTac

Смяна на превръзката при клинична индикация или видим по ръбовете ексудат

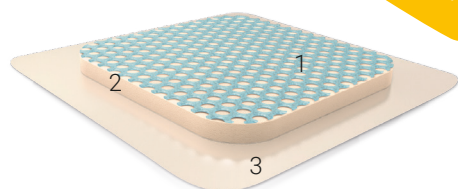

1. AquaClear Gel технология – активно освобождава влага дори в много сухи рани, стимулира образуването на епител и спомага за атравматичното отстраняване на превръзката
2. Полиуретанова структура
3. Непропусклив филм – водо- и бактериоустойчив горен слой; модел Comfort е с допълнителна лепяща рамка

Хидрополимерна пенеста превръзка с уникална AquaClear Gel технология, която защитава раната и ускорява естествените оздравителни процеси. Абсорбиращият пенест материал надеждно задържа раневия ексудат. Контактният слой с хидрогел от водосъдържащ полиуретанов хибриден полимер с пропилен гликол осигурява оптимална влажна среда в раната и засилва оздравителните процеси в организма.

**Приложение:** За лечение на рани с умерена до слаба секреция във фазата на грануляция и епителизация; за третиране на изгаряния до 2-ра степен и кожни присадъци.

Наименование	Размер	Размер на подложката	Брой в опаковка	Каталожен номер
HydroTac	ф 6 см		10 бр.	685 849
	10 x 10 см		3 бр.	685 831
	10 x 20 см		3 бр.	685 833
	15 x 15 см		3 бр.	685 839
	20 x 20 см		10 бр.	685 844
HydroTac comfort	8 x 8 см	3,5 x 3,5 см	10 бр.	685 810
	12,5 x 12,5 см	7,5 x 7,5 см	10 бр.	685 815
	15 x 15 см	10 x 10 см	3 бр.	685 817
	20 x 20 см	14 x 14 см	3 бр.	685 822

## Atrauman Ag



Тюлена мазева превръзка, импрегнирана с метално сребро и хидрофилна маз със смес на натурални мастни киселини и глицерол от растителен произход, с антибактериално действие.

За приложение при инфектирани рани и за профилактика срещу инфекция. Може да остане върху раната до 3 дни.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Atrauman Ag	5 x 5 см	3 бр.	499 570
	5 x 5 см	10 бр.	499 571
	10 x 10 см	3 бр.	499 572
	10 x 10 см	10 бр.	499 573
	10 x 20 см	3 бр.	499 574
	10 x 20 см	10 бр.	499 575

## Atrauman Silicone



Мека тънка стерилна превръзка, изработена от мрежа от полиетилен терефталат, покрита със силиконов гел. Действа като контактен слой при лечение на повърхностни, остри и хронични рани със слаба до средна ексудация. Силиконовият слой предпазва от залепяне към раната, а мрежестата основа позволява преминаване на ексудат.

Лесно се оформя по кожата и може да се реже до желан размер и форма.

**Приложение:** Като първична превръзка или в комбинация с абсорбираща вторична превръзка. Подходяща при терапия с негативно налягане. Също така, може да се прилага като защитен слой върху неексудирани рани и върху зони с повишена чувствителност. Може да остане върху раната до 7 дни. Препоръчва се ревизия на 3 ден.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Atrauman Silicone	7,5 x 10 см	5 бр.	499 561
	10 x 20 см	5 бр.	499 563
	20 x 30 см	5 бр.	499 565

## Atrauman



Атравматична тюлена превръзка от хидрофобна полиестерна мрежа. Импрегнирана с унгвент на триглицеридна основа, без примеси на парафини и активни фармацевтични съставки.

Подходяща за лечение във всички фази на оздравителния процес и най-вече за епителизиращи и гранулиращи рани. Може да остане върху раната до 3 дни.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Atrauman	5 x 5 см	10 бр.	499 510
	7,5 x 10 см	10 бр.	499 513
	10 x 20 см	30 бр.	499 536

## Grassolind



Превръзка от рядко тъкана мрежа, импрегнирана с унгвент с вазелин и парафин, без съдържание на активни фармацевтични съставки. Осигурява добра пропускливост на секретията и достъп на кислород към раната.

Подходяща при пресни и хронични повърхностни рани. Може да остане върху раната до 3 дни.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Grassolind	5 x 5 см	10 бр.	499 310
	7,5 x 10 см	10 бр.	499 313
	10 x 10 см	10 бр.	499 314
	10 x 20 см	30 бр.	499 336

## PermaFoam



Хидроактивна превръзка с пенеста структура с отворени пори със силно абсорбиращо действие на капилярен принцип, с горен слой, пропусклив за водни пари. Осигурява бързо почистване на раната и създава влажна среда, спомагаща оздравителните процеси. За приложение при неинфектирани рани със средна до силна ексудация. Особено подходяща при рани от съдов произход, декубитуси или рани, вследствие на диабет. Може да остане върху раната до 4 дни. Моделът PermaFoam Classic border е снабден с лепящ кант, позволяващ надеждно фиксиране към кожата.

Наименование	Размер	Размер на подложката	Брой в опаковка	Каталожен номер
PermaFoam Classic	ф 6 см		10 бр.	882 004
	10 x 10 см		10 бр.	882 000
	15 x 15 см		10 бр.	882 001
	10 x 20 см		10 бр.	882 002
PermaFoam Tracheostomy	20 x 20 см		10 бр.	882 003
	8 x 8 см		10 бр.	882 005
PermaFoam Classic border	10 x 10 см	5 x 5 см	10 бр.	882 006
	15 x 15 см	10 x 10 см	10 бр.	882 007
PermaFoam Classic Concave /пета, лакът/	10 x 30 см	5 x 24 см	10 бр.	882 008
	16,5 x 18 см	10,5 x 12 см	10 бр.	882 009
PermaFoam Classic Sacral /сакрум/	18 x 18 см	9,5 x 11,5 см	10 бр.	882 011
	22,5 x 22,5 см	11,5 x 13,5 см	10 бр.	882 012

## Sorbalgon



Превръзка от калциево-алгинатни фибри, които се трансформират в гел при контакт с раневия ексудат. Силно абсорбираща, с висока въздухопропускливост и кръвоспираща способност. За приложение на пресни и хронични, дълбоки и повърхностни рани с умерена до силна секреция и кървене. Sorbalgon се подменя след пълната му трансформация в гел. Препоръчва се промиване на раната.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Sorbalgon	5 x 5 см	10 бр.	999 598
	10 x 10 см	10 бр.	999 595
	10 x 20 см	5 бр.	999 589

## HydroColl



Абсорбираща самофиксираща се превръзка с хидроколидна матрица от синтетичен еластомер, минерално масло и натриев карбоксиметилцелулоза за лечение на рани във влажна среда. Покрита с полупрозрачен водоотблъскващ горен слой, който възпрепятства проникването на микроорганизми. Приляга добре по формата на тялото. Подходяща за хронични неинфектирани рани със слаба ексудация във фазата на грануляция и епителизация, напр. трофични язви, декубитуси и др. Hydrocoll се сменя, когато превръзката видимо се обезцвети и се оформи мехурче от акумулиран ексудат, приблизително с размерите на раната.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
HydroColl	5 x 5 см	10 бр.	900 740
	7,5 x 7,5 см	10 бр.	900 742
	10 x 10 см	10 бр.	900 744
	15 x 15 см	5 бр.	900 748
	20 x 20 см	5 бр.	900 749
HydroColl Sacral	12 x 18 см	3 бр.	900 931
HydroColl Concave	8 x 12 см	10 бр.	900 756
HydroColl Thin	10 x 10 см	10 бр.	900 758

## HydroSorb



Абсорбираща прозрачна превръзка с хидрогел с 60% съдържание на вода. Полупроницаемият повърхностен слой не позволява проникване на микроорганизми и вода. Позволява мониториране на раната във всеки един момент. Подходяща при хронични неинфектирани сухи рани във фазата на епителизация. HydroSorb може да остане върху раната до 5 дни, а в случаи с намаляваща секреция до 7 дни.

Наименование	Размер	Размер на подложката	Брой в опаковка	Каталожен номер
HydroSorb	5 x 7,5 см		5 бр.	900 853
	10 x 10 см		5 бр.	900 854
	20 x 20 см		3 бр.	900 855
HydroSorb Comfort	4,5 x 6,5 см	2,5 x 3,8 см	5 бр.	900 702
	7,5 x 10 см	4 x 6,8 см	5 бр.	900 706
	12,5 x 12,5 см	8 x 8 см	5 бр.	900 723
	21,5 x 24 см	16 x 18,5 см	3 бр.	900 729

## HydroSorb Gel



Вискозен аморфен хидрогел на базата на разтвор на Рингер и глицерин. Подпомага размекването и отделянето на некроза чрез постоянно овлажняване на раната. В удобна спринцовка с прецизно дозиране и мерителни скали на буталото.

За приложение при повърхностни и дълбоки рани със слаба ексудация. Смяна на придружаващата превръзка в зависимост от нейните показания.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
HydroSorb Gel	15 гр	10 бр.	900 844

## Cosmopor E



Самофиксираща се превръзка от мек нетъкан материал, покрит с хипоалергичен адхезив, с незалепваща двуслойна вискозна подложка с добра абсорбираща и буферна способност. Отстранява се безболезнено от раната. Със заоблени краища предотвратяващи преждевременното им отлепяне и нагъване и хипоалергичен синтетичен адхезив без колофон, латекс и фталати.

За пост-оперативно третиране на рани и стерилно лечение на малки наранявания, напр. при оказване на първа помощ.

Наименование	Размер	Размер на подложката	Брой в опаковка	Каталожен номер
Cosmopor E	5 x 7,2 см	2,5 x 4 см	50 бр.	900 870
	10 x 6 см	6,5 x 2,5 см	25 бр.	900 871
	15 x 6 см	11 x 2,5 см	25 бр.	900 872
	10 x 8 см	6,5 x 3,8 см	25 бр.	900 873
	15 x 8 см	11 x 3,8 см	25 бр.	900 874
	20 x 8 см	16 x 3,8 см	25 бр.	900 875
	20 x 10 см	16 x 5,5 см	25 бр.	900 876
	25 x 10 см	20,5 x 5,5 см	25 бр.	900 877
	35 x 10 см	30,5 x 5,5 см	25 бр.	900 878

## Hydrofilm



Прозрачна самофиксираща се пост-оперативна превръзка от полупропусклив водонепроницаем полиуретанов филм. Отстранява се безболезнено без остатъци.

За предпазване на сухи и първични рани и за фиксиране на катетри или канюли. Много подходяща като вторична превръзка. За предпазване на сухи и първични рани и за фиксиране на катетри или канюли. Много подходяща като вторична превръзка.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Hydrofilm	6 x 7 см	10 бр.	685 755
	10 x 12,5 см	10 бр.	685 757
	10 x 15 см	10 бр.	685 759
	15 x 20 см	10 бр.	685 761
	10 x 25 см	25 бр.	685 763
	12 x 25 см	25 бр.	685 764
	20 x 30 см	10 бр.	685 765

## Hydrofilm Plus



Прозрачна самофиксираща се пост-оперативна превръзка от полупропусклив водонепроницаем полиуретанов филм с абсорбираща подложка. Отстранява се безболезнено без остатъци.

За предпазване на сухи и първични рани и за фиксиране на катетри или канюли. Със заоблени краища предотвратяващи преждевременното им отлепяне и нагъване. Много подходяща като вторична превръзка.

Наименование	Размер	Размер на подложката	Брой в опаковка	Каталожен номер
Hydrofilm Plus	5 x 7,2 см	2,5 x 4 см	50 бр.	685 771
	9 x 10 см	4 x 6 см	5 бр.	685 772
	9 x 10 см	4 x 6 см	50 бр.	685 773
	9 x 15 см	4 x 11 см	5 бр.	685 774
	9 x 15 см	4 x 11 см	25 бр.	685 775
	10 x 12 см	5 x 8 см	25 бр.	685 776
	10 x 20 см	5 x 16 см	5 бр.	685 777
	10 x 20 см	5 x 16 см	25 бр.	685 778
	10 x 25 см	5 x 20 см	25 бр.	685 779
	10 x 30 см	5 x 25 см	25 бр.	685 780

## Hydrofilm Roll



Нестерилна адхезивна ролка от прозрачен полупропусклив водонепроницаем филм. С носеща хартия с вълнообразно рязане с отлепяне в две стъпки и хипоалергичен адхезив.

За фиксиране на първични превръзки.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Hydrofilm Roll	10 см x 2 м	1 бр.	685 791
	10 см x 10 м	1 бр.	685 792

## Cosmopor I.V.



Стерилна адхезивна превръзка със заоблени краища, с прорез за фиксиране на периферни интравенозни канюли от мек нетъкан материал с незалепваща двуслойна подложка от полупропусклив контактен слой от полиетилен, незалепващ за раната и абсорбиращ вискозен слой. Снабдена с допълнителна подложка, която предпазва кожата от раздразнение след поставяне на интравенозни канюли.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Cosmopor I.V.	6 x 8 см	50 бр.	900 805

## Cosmopor I.V. Transparent



Стерилна адхезивна превръзка с прорез за фиксиране на канюли. Изработена от мек 100% полиестерен нетъкан материал с хипоалергичен адхезив. Снабдена с прозрачен полупропусклив водоотблъскващ прозорец с хипоалергичен адхезив, който позволява мониториране на мястото на убождане. Непромокаемият филм създава бариера срещу течности, бактерии и външни замърсители. Допълнителни стрипове позволяват надеждната фиксация на канюлите за по-дълъг период. Детският размер е с весели картинки.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Cosmopor I.V. Transparent детски	6 x 5 см	100 бр.	900 817
Cosmopor I.V. Transparent	7 x 9 см	100 бр.	900 818
Cosmopor I.V. Transparent за ЦВК	10 x 12 см	50 бр.	900 819

## Omnistrip



Стерилни ленти за безшевно затваряне на рани, изработени от полиестерен нетъкан материал с хипоалергичен акрилатен адхезив. Със заоблени краища. С напречна еластичност 75% и надлъжна 32%.

Наименование	Размер	Брой стрип в стер. опаковка	Брой стер. опаковки в кутия	Каталожен номер
Omnistrip	3 x 76 мм	5 стрипа	50 бр.	540 681
	6 x 38 мм	6 стрипа	50 бр.	540 682
	6 x 76 мм	3 стрипа	50 бр.	540 683
	6 x 101 мм	10 стрипа	50 бр.	540 684
	12 x 101 мм	6 стрипа	50 бр.	540 685

## Omnifix E



Хипоалергична самозалепваща лента от мек нетъкан текстил за прикрепяне и фиксиране на превръзки. С носеща хартия със зигзагообразно рязане, еластична по ширина, с висока въздухо- и влопопропускливост, отстранява се безболезнено без остатъци. В индивидуална картонена опаковка.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Omnifix E	5 см x 10 м	1 бр.	900 649
	10 см x 10 м	1 бр.	900 650
	15 см x 10 м	1 бр.	900 651
	20 см x 10 м	1 бр.	900 652
	2,5 см x 10 м	2 бр.	900 606
	10 см x 2 м	1 бр.	900 601



## Omnifix Silicone



Фиксираща 3-слойна лента за надеждна и нежна фиксация на първични превръзки. Изработена от бял полиестерен нетъкан материал с контактен силиконов адхезивен слой и филмово покритие от прозрачен полиетилен. Контактният силиконов слой е с предпазно фолио с вълнообразно рязане и указателни стрелки. Силиконовият слой нежно се залепа за кожата и предлага многократно отлепяне без травмиране.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Omnifix Silicone	10 cm x 5 m	1 бр.	900 001

## Оmnі-ленти



Хипоалергични адхезивни ленти за прикрепяне на всякакъв тип превръзки и фиксиране на оборудване, сонди и канюли. Нежни към кожата, отстраняват се безболезнено и без остатъци. Полистиренова шпулка. В индивидуална картонена опаковка.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Omnisilk, копринена	5 м x 1,25 см	1 бр.	900 430
	5 м x 2,5 см	1 бр.	900 431
	5 м x 5 см	1 бр.	900 432
	9,2 м x 1,25 см	1 бр.	900 418
	9,2 м x 2,5 см	1 бр.	900 419
	9,2 м x 5 см	1 бр.	900 420
Omnifilm, филм	5 м x 1,25 см	1 бр.	900 433
	5 м x 2,5 см	1 бр.	900 434
	5 м x 5 см	1 бр.	900 435
	9,2 м x 1,25 см	1 бр.	900 421
	9,2 м x 2,5 см	1 бр.	900 422
	9,2 м x 5 см	1 бр.	900 423
Omnipor, хартиена	5 м x 1,25 см	1 бр.	900 436
	5 м x 2,5 см	1 бр.	900 437
	5 м x 5 см	1 бр.	900 438
	9,2 м x 1,25 см	1 бр.	900 424
	9,2 м x 2,5 см	1 бр.	900 425
	9,2 м x 5 см	1 бр.	900 426
Omniplast, текстилна	5 м x 1,25 см	1 бр.	900 440
	5 м x 2,5 см	1 бр.	900 441
	5 м x 5 см	1 бр.	900 442
	9,2 м x 1,25 см	24 бр.	900 452
	9,2 м x 2,5 см	12 бр.	900 453
	9,2 м x 5 см	6 бр.	900 454

## Марлени компреси Sterilux ES



Марлени компреси, изработени от абсорбираща марля с рязани краища, със сгънати навътре ръбове, 17 нишки, надлъжни нишки 70/10см, напречни нишки 100/10см, минимум 23гр./кв.м.

Наименование	Размер	Брой дупли	Брой в опаковка	Каталожен номер
Sterilux ES стерилни	5 x 5 см	8 дупли	25 x 2 бр.	418 551
	7,5 x 7,5 см	8 дупли	25 x 2 бр.	418 554
	10 x 10 см	8 дупли	25 x 2 бр.	418 557
	5 x 5 см	8 дупли	5 бр.	232 002
	7,5 x 7,5 см	8 дупли	5 бр.	232 007
	10 x 10 см	8 дупли	5 бр.	232 012
Sterilux ES нестерилни	5 x 5 см	8 дупли	100 бр.	418 800
	7,5 x 7,5 см	8 дупли	100 бр.	418 802
	10 x 10 см	8 дупли	100 бр.	418 804
	5 x 5 см	12 дупли	100 бр.	418 806
	7,5 x 7,5 см	12 дупли	100 бр.	418 807
	10 x 10 см	12 дупли	100 бр.	418 809
	5 x 5 см	16 дупли	100 бр.	401 841
	7,5 x 7,5 см	16 дупли	100 бр.	401 843
	10 x 10 см	16 дупли	100 бр.	401 845

## Telacomp



Нестерилни марлени компреси, изработени от абсорбираща марля с рязани краища, със сгънати навътре ръбове, 17 нишки. С вътъкана рентгеноконтрастна нишка.

Наименование	Размер	Брой дупли	Брой в опаковка	Каталожен номер
Telacomp	5 x 5 см	16 дупли	100 бр.	401 941
	7,5 x 7,5 см	16 дупли	100 бр.	401 943
	10 x 10 см	16 дупли	100 бр.	401 945

## Mullro



Абсорбираща памучна марля на ролка, 20 нишки/кв.см. Обща ширина от 80 см, нагъната на 8 дупли до 10 см.

Наименование	Размер	Брой дупли	Брой в опаковка	Каталожен номер
Mullro	2 м	8 дупли	1 бр.	209 403
	5 м	8 дупли	1 бр.	209 405
	10 м	8 дупли	1 бр.	209 406

## Verbandmull ZZ



Абсорбираща памучна марля, 20 нишки/кв.см. Зигзагообразно нагъната. Обща ширина от 80 см, нагъната на 8 дупли до 10 см.

Наименование	Размер	Брой дупли	Брой в опаковка	Каталожен номер
Verbandmull ZZ	2 м	8 дупли	1 бр.	206 403
	5 м	8 дупли	1 бр.	206 405
	10 м	8 дупли	1 бр.	206 406
	40 м	8 дупли	1 бр.	206 407

## Medicomp



Компреси с марлена структура от бял нетъкан материал, не отделят мъх, без оптически избелващи агенти.

Наименование	Размер	Брой дипли	Брой в опаковка	Каталожен номер
Medicomp стерилни	5 x 5 см	4 дипли	25 x 2 бр.	411 074
	7,5 x 7,5 см	4 дипли	25 x 2 бр.	411 072
	10 x 10 см	4 дипли	25 x 2 бр.	411 064
Medicomp нестерилни	5 x 5 см	4 дипли	100 бр.	421 821
	7,5 x 7,5 см	4 дипли	100 бр.	421 823
	10 x 10 см	4 дипли	100 бр.	421 825

## MediSet за сваляне на конци



Еднократен стерилен сет за сваляне на конци, съдържащ марлени компреси, пинсета с остри краища и оребрена повърхност и лезвие със сърповидна форма. В индивидуален PVC контейнер.

Наименование	Съдържание	Брой в опаковка	Каталожен номер
Mediset за сваляне на конци	Компрес НТТ 7,5x7,5 см, 4 дипли	2 бр.	479 996
	Пинсета	1 бр.	
	Лезвие	1 бр.	

## MediSet за суха превръзка



Еднократен стерилен сет за суха превръзка на рани, съдържащ компреси от нетъкан текстил, тампони от нетъкан текстил и пинсета с остри краища и оребрена повърхност. В индивидуален PVC контейнер.

Наименование	Съдържание	Брой в опаковка	Каталожен номер
Mediset за суха превръзка	Компрес НТТ 7,5x7,5 см, 4 дипли	5 бр.	470 632
	Тампон НТТ, ф 3 см	5 бр.	
	Пинсета	1 бр.	

## MediSet за хирургичен шев



Еднократен стерилен сет за хирургичен шев, съдържащ операционен чаршаф от нетъкан текстил с отвор, тупфери от нетъкан текстил и три метални инструмента. В индивидуален PVC контейнер.

Наименование	Съдържание	Брой в опаковка	Каталожен номер
MediSet за хирургичен шев	Чаршаф с отвор 48x48 см	1 бр.	475 633
	Тупфери от НТТ, размер 3 (слива)	4 бр.	
	Метална Adson пинсета	1 бр.	
	Метален иглодържател May-Hegar	1 бр.	
	Метална ножица права, остри върхове	1 бр.	

## Zetuvit E



Силно абсорбираща памперсна превръзка-компрес с покривен слой от нетъкан полипропилен, недразнещ кожата и силноабсорбираща сърцевина от разбита целулоза. Контактният слой към раната не позволява залепване, а горният хидрофобен слой действа като бариера срещу контаминация. Без съдържание на латекс, колофон и фталати.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Zetuvit E стерилен	10 x 10 см	25 бр.	413 770
	10 x 20 см	25 бр.	413 771
	15 x 20 см	25 бр.	413 772
	15 x 25 см	10 бр.	413 773
	20 x 20 см	15 бр.	413 774
	20 x 25 см	15 бр.	413 775
Zetuvit E нестерилен	20 x 40 см	10 бр.	413 776
	10 x 10 см	50 бр.	413 860
	10 x 20 см	50 бр.	413 861
	15 x 20 см	50 бр.	413 862
	15 x 25 см	50 бр.	413 863
	20 x 20 см	50 бр.	413 864
	20 x 25 см	50 бр.	413 865
20 x 40 см	30 бр.	413 866	

## Eycopad



Очна превръзка от абсорбираща памучна вата с покритие от памучна марля. Изключително мека, с отличен буферен ефект.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Eycopad стерилен	56 x 70 мм	25 бр.	415 540
	70 x 85 мм	25 бр.	417 540
Eycopad нестерилен	56 x 70 мм	50 бр.	415 650
	70 x 85 мм	50 бр.	417 650

## Peha-fix



Супер еластичен фиксиращ бинт от мек крепов материал с високо съдържание на натурални нишки в отворена структура, с отлична въздухо-пропускливост и добър захват поради креповата текстура. Еластичност 160%, устойчив на високи температури, подлежи на стерилизация (пара 134°), тегло 27гр/кв.м., в индивидуална опаковка.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Peha-fix	4 м x 4 см	1 бр.	303 085
	4 м x 6 см	1 бр.	303 086
	4 м x 8 см	1 бр.	303 087
	4 м x 10 см	1 бр.	303 088

## Rolta Soft



Изключително мека синтетична подложка от неабсорбиращи надиплени полиестерни нишки за употреба под гипсов бинт или синтетични обездвижващи средства и под компресивни бинтове, особено подходящо при пациенти с чувствителна кожа.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Rolta Soft	3м x 10 см	30 бр.	932 049
	3м x 15 см	20 бр.	932 050
	3м x 25 см	10 бр.	932 051

## Peha Haft



Самозалепващ бял фиксиращ бинт с кохезивен ефект поради креповата текстура и покритието без съдържание на латекс. Разтегливост приблизително 85%, залепва само за себе си, а не към кожата или дрехите, с висока въздухо - пропускливост. Сплитка лито. Съдържание 43% вискоза, 37% памук, 20% полиамид.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Peha Haft	4 м x 4 см	1 бр.	932 441
	4 м x 6 см	1 бр.	932 442
	4 м x 8 см	1 бр.	932 443
	4 м x 10 см	1 бр.	932 444
	4 м x 12 см	1 бр.	932 445
	20 м x 10 см	1 бр.	932 449

## Idealflex Universal



Многофункционален ластичен бинт с постоянна еластичност приблизително 85%. За прикрепяне на превръзки с лек компресивен ефект; при нужда от лека компресия; като поддържащ бинт при мускулно-скелетни травми; като спортен бинт. Бял цвят. Сплитка лито. Съдържание 66% памук, 33% полиамид, 1% еластан. Подлежи на стерилизация (пара 134°).

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Idealflex Universal	5 м x 6 см	1 бр.	931 321
	5 м x 8 см	1 бр.	931 322
	5 м x 10 см	1 бр.	931 323

## Stülpa



Безшевнен плетен тубуларен бинт с висока еластичност по дължина и ширина (прибл. 300%) за лесно фиксиране на превръзки; за поставяне под или върху гипс, шина или цинков бинт. С различни ширини в зависимост от мястото на прилагане.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Stülpa 0R - детски пръсти	15 м x 1,5 см	1 бр.	427 110
Stülpa 1R - пръсти	15 м x 2,5 см	1 бр.	427 111
Stülpa 2R - ръце и детски крака	15 м x 6 см	1 бр.	427 112
Stülpa 3R - стъпало, крак, детска глава, мишници	15 м x 8 см	1 бр.	427 113
Stülpa 4R - глава, крак, мишници, лице	15 м x 10 см	1 бр.	427 114
Stülpa 5R - детски торс, глава, бедро, мишница	15 м x 12 см	1 бр.	427 115
Stülpa 6R - детски торс, бедро	6 м x 15 см	1 бр.	427 146
Stülpa 7R - торс и широки бедра	6 м x 21 см	1 бр.	427 147
Stülpa 8R - торс	6 м x 24 см	1 бр.	427 148

## Stülpa Fix



Безшевнен мрежест тубуларен бинт с висока еластичност (надлъжна 95%, напречна 800%) за лесно фиксиране на превръзки. Лесно се реже и оформя без нищене. Дължина 25 м в разтегнато състояние и 12 м в неразтегнато състояние. Съдържание 68% памук, 24% полиамид, 8% еластан. Подлежи на стерилизация (пара 134°).

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Stülpa Fix размер 1 - пръсти и детски длани	1 см	1 бр.	932 541
Stülpa Fix размер 2 - пръсти и детски ръце, крака, ходила	2 см	1 бр.	932 542
Stülpa Fix размер 3 - длани, ръце и детска глава	3 см	1 бр.	932 543
Stülpa Fix размер 4 - крака, ходила и детски торс	5 см	1 бр.	932 544
Stülpa Fix размер 5 - глава и детски торс	6,5 см	1 бр.	932 545
Stülpa Fix размер 6 - торс	8,5 см	1 бр.	932 546
Stülpa Fix размер 7 - широк торс	11,5 см	1 бр.	932 547

## Pütterbinde



Слабо разтеглив памучен крепов бинт с текстилна еластичност приблизително 90%. Осигурява висока компресия в работно положение и лека компресия в покой, упражнява компресия и при дълготрайна употреба. Телесен цвят.

Съдържание 100% памук.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Pütterbinde	5 м x 8 см	1 бр.	931 808
	5 м x 10 см	1 бр.	931 810
	5 м x 12 см	1 бр.	931 812

## Pütterflex



Особено тънък, двойно еластичен, слабо разтеглив бинт с надлъжна еластичност приблизително 90% и напречна еластичност приблизително 40%. Осигурява изключително висока компресия в работно положение и лека компресия в положение на покой. Телесен цвят.

Съдържание 100% памук.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Pütterflex	5 м x 8 см	1 бр.	931 828
	5 м x 10 см	1 бр.	931 829

## Lastodur Soft



Силно разтеглив бинт с постоянна еластичност приблизително 170%. Оказва висока компресия в покой и по-лека в работно положение. Телесен цвят.

Съдържание 82% памук, 13% полиамид, 5% еластан.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Lastodur Soft	7 м x 6 см	1 бр.	931 653
	7 м x 10 см	1 бр.	931 655

## Varolast Plus



Еластичен компресивен бинт с кремообразна цинкова паста, готов за употреба. Отличната гъвкавост и мекият материал позволяват равномерно разпределение на компресията без стягане. Нежен към кожата.

Съдържание 69% вискоза, 34% вискоза.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Varolast Plus	10 см x 7 м	1 бр.	931 583

## MoliCare bed mat



Чаршафчета със силно абсорбираща сърцевина от разбита целулоза и горен слой от нетъкан текстил, който не задържа влага. Долният слой е изработен от водонепропусклив полиетилен.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
MoliCare bed mat	40 x 60 см	25 бр.	161 066
	60 x 60 см	25 бр.	161 068
	60 x 90 см	25 бр.	161 070
	60 x 90 см с крила (до 60 x 180 см)	30 бр.	161 072

## MoliCare



Силно абсорбиращ памперс за възрастни с анатомична форма; с 3-слойно абсорбиращо ядро с патентовани молекули циклодекстрин, неутрализиращи миризмата, със странични ивици, предпазващи от изтичане на течност, индикатор за смяна върху външната страна и фиксиращи лепенки за многократно отваряне; дерматологично тествани.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
MoliCare	Размер S	30 бр.	165 331
	Размер M	30 бр.	165 332
	Размер L	30 бр.	165 333
	Размер XL	14 бр.	165 234

## Peha-Soft Nitrile



Еднократни нестерилни ръкавици, изработени от синтетичен нитрил без съдържание на латекс и пудра. Текстурирани в областта на пръстите, високо еластични и устойчиви на късане. Без риск от алергии към латекс.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Peha-Soft Nitrile сини	Размер XS	100 бр.	942 189
	Размер S	100 бр.	942 190
	Размер M	100 бр.	942 191
	Размер L	100 бр.	942 192
	Размер XL	90 бр.	942 193
Peha-Soft Nitrile бели	Размер S	100 бр.	942 216
	Размер M	100 бр.	942 217
	Размер L	100 бр.	942 218
	Размер S	200 бр.	942 206
	Размер M	200 бр.	942 207
	Размер L	200 бр.	942 208
	Размер XL	180 бр.	942 209

## Pagavit



Еднократни тупфери за тоалет на устна кухина, напоени с лимонено-глицеринов разтвор. По 3 броя в индивидуална фолирана опаковка.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
Pagavit	4,8 гр.	3 бр.	931 059

## MoliCare Skin Cleansing Foam



Пяна за нежно и бързо почистване на силно замърсена кожа в резултат на инконтиненция, без употреба на вода и измиващи средства. Съдържа креатин, който подпомага естествените процеси за защита на кожата. С патентован неутрализатор на миризми и неутрално рН.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
MoliCare Skin Cleansing Foam	400 мл.	1 бр.	995 029

## MoliCare Moist Skin Care Tissues



Меки влажни кърпички, напоени с почистващ лосион за бързо и удобно почистване на кожата, в резултат на инконтиненция с екстракт от лайка. Без съдържание на алкохол, с неутрално рН.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
MoliCare Moist Skin Care Tissues	50 бр. кърпички	1 бр.	995 082

## MoliCare Skin Wash Gloves



Меки почистващи ръкавици, тип джоб за обтриване на пациент. Импрегнирани са с нежна измивна течност и съдържат пантенол и Алое Барбаденсис. С балансирано за кожата рН. Могат да се използват със стайна температура или да се затоплят в микровълнова на не повече от 700W и за не повече от 40 сек.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
MoliCare Skin Wash Gloves	8 броя	1 бр.	995 083

## MoliCare Shampoo



Нежен почистващ шампоан за коса и сух чувствителен скалп. Пълно измиване дори и при по-рядка употреба. С подхранващ пантенол, бадемово олио и глицерин. С неутрално рН.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
MoliCare Shampoo	500 мл.	1 бр.	995 030

## MoliCare Skin Wash Lotion



Измивен лосион със съдържание на пантенол и бадемово олио за нежно почистване на раздразнена кожа. Неутрализира миризмата и е с неутрално за кожата рН. Подходящ за ежедневна употреба.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
MoliCare Skin Wash Lotion	500 мл.	1 бр.	995 027



## MoliCare Skin Care cream



Защитен крем с креатин и цинков оксид, които подпомагат естествените механизми за защита на кожата от въздействието на вредни вещества, особено в гениталната област. Образува защитен филм върху кожата.

Съдържа и аминокиселини, бадемово олио и олио от ленено семе. Надеждна профилактика срещу поява на декубитус. С неутрализатор на миризми.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
MoliCare Skin Care Cream	200 мл.	1 бр.	995 035

## MoliCare Skin Protection Foam



Защитна пяна с креатин, урея и пантенол, образуваща дълготрайна дишаща бариера в гениталната област, особено при инконтиненция.

Съдържа и алантоин, аминокиселини, бадемово олио и олио от ленено семе, които подхранват, хидратират и ускоряват регенериращите процеси на кожата.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
MoliCare Skin Protection Foam	100 мл.	1 бр.	995 037

## MoliCare Hand Cream



Крем за ръце за интензивна грижа на много суха раздразнена кожа, със съдържание на креатин, пантенол и бадемово олио, които подпомагат естествените механизми за защита на кожата.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
MoliCare Hand Cream	200 мл.	1 бр.	995 033

## MoliCare Skin Body Lotion



Силно овлажняващ лосион за тяло за суха и раздразнена кожа, съдържащ креатин, бадемово олио аминокиселини есенциални мастни киселини. Подпомага естествените защитни механизми на кожата. С удобна дозираща помпа.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
MoliCare Skin Body Lotion	500 мл.	1 бр.	995 032

## MoliCare Skin Care Oil


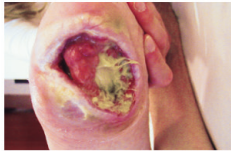





Поддържащо олио за кожа с витамин Е за интензивна грижа на много суха и раздразнена кожа. Разнася се лесно и не оставя мазно усещане.

Наименование	Размер	Брой в опаковка	Каталожен номер
MoliCare Skin Care Oil	500 мл.	1 бр.	995 034

## Ръководство за лечение на рани

Изчистване на раната		Грануляция		Епителизация
Некроза	Инфекция	Фибринов налеп		
<b>Повърхностни рани</b>				
				
<b>Силно секретирани рани</b>				
> HydroClean Advance	> Atrauman Ag с абсорбираща вторична превръзка	> HydroClean Advance > PermaFoam Classic /Border/Sacral/Concave	> HydroTac / Comfort	> HydroTac / Comfort > HydroSorb / Comfort > HydroColl
<b>Слабо секретирани рани</b>				
	> HydroClean Advance > Atrauman Ag с абсорбираща вторична превръзка	> HydroClean Advance		

Изчистване на раната		Грануляция		Епителизация
Некроза	Инфекция	Фибринов налеп		
<b>Дълбоки рани</b>				
				
<b>Силно секретирани рани</b>				
> HydroClean Advance	> Sorbalgon > Atrauman Ag с абсорбираща вторична превръзка	> HydroClean Advance > Sorbalgon	> HydroSorb Gel	> HydroTac / Comfort > HydroSorb / Comfort > HydroColl
<b>Слабо секретирани рани</b>				
	> HydroClean Advance			

Фиксиращи превръзки	Вторични превръзки	Компресивни бинтове
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Omnifix E</li> <li>&gt; Omniplast</li> <li>&gt; Omnisilk</li> <li>&gt; Peha-fix</li> <li>&gt; Stülpa-fix</li> <li>&gt; Peha-haft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Zetuvit E</li> <li>&gt; Cosmopor E</li> <li>&gt; Hydrofilm Plus</li> <li>&gt; Sterilux ES</li> <li>&gt; Medicomp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Varolast Plus</li> <li>&gt; Pütterbinde</li> <li>&gt; Pütterflex</li> <li>&gt; Idealflex Universal</li> </ul>

## Комплексен подход в лечението на рани

### Функции на превръзката

До заздравяване на раната, превръзката изпълнява важните функции на здрава кожа.

Тя осигурява:

- защита срещу механично въздействие (мръсотия, удряне, протриване), срещу замърсяване и химично раздразнение
- защита срещу вторични инфекции
- защита срещу изсъхване и загуба на телесни течности
- защита от топлинна загуба

Освен всеобхватната защита на раната, превръзката може активно да повлияе на оздравителния процес, чрез почистване на раната, създаване на микроклимат, който подпомага раневото заздравяване и осигурява покой за раната.

### Функции във фазата на почистване

- Да абсорбира образувалия се ексудат, изпълнен с мъртви клетки, тъканни фрагменти, чужди тела и бактерии
- Да подпомага и ускорява почистването на раната и да помага за предотвратяване на инфекцията, предизвиквана от намиращите се в раната патогенни микроорганизми
- Да защитава раната от допълнителна контаминация

### Функции във фазата на гранулацията

- да се поддържа балансирана влажна ранева среда
- да абсорбира прекомерната секреция, да предотвратява изсъхването на раната и да осигурява достатъчно количество влага
- да защитава грануляционния тъкан срещу всякакъв вид последваща травма
- да е атравматична и да не залепва към раната
- да осигурява надеждна защита срещу инфекция

### Функции във фазата на епителизация

- да поддържа балансираната влажност на раната
- да защитава повърхността на раната от изсъхване и да предпазва епителните клетки от травмиране при смяна на превръзката

### Сухо лечение на раните

Използването на сухи превръзки за рани днес е ограничено до следните показания:

- лечение на рани, като част от първа помощ
- лечение на първично заздравяващи рани, затворени с шевове, за абсорбиране на процеждащата се кръв, за защита от вторична инфекция и подплатяване срещу механично дразнене.


### Влажно лечение на раните

Лечението на рани във влажна среда се счита за стандартна форма на лечение за всички рани, зарастващи вторично, при които се изисква произвеждане на тъкан за запълване на дефекта. То е доказало своята стойност, особено при лечение на хронични проблемни рани, тъй като влажната и пропусклива превръзка и получената влажна ранева среда, водят до по-бързо заздравяване, отколкото изложената на въздух, суха ранева среда.

- В почистващата фаза, влажните превръзки показват добър почистващ ефект върху раната и позволяват физически дебридман, без увреждане на клетки
- В гранулиращата фаза, превръзките създават физиологичен микроклимат, подобен на този на клетъчна култура, който подпомага клетъчната пролиферация и поради това - образуването на грануляционна тъкан
- В епителизиращата фаза, условията за митоза и миграция на епителни клетки се подобряват под влажни превръзки, което води до бърза епителизация с козметично по-благоприятни резултати.

### Фази на оздравителния процес

(схематично представяне във времето)

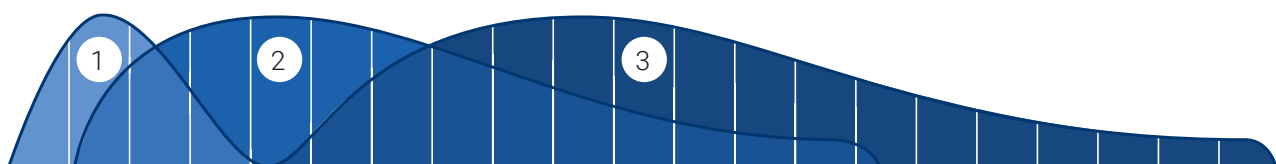

1. Фаза на почистване; 2. Фаза на гранулация; 3. Фаза на епителизация

ТП Хартманн-Рико  
1113 София, кв. Изток  
ул. Майор Юрий Гагарин 25А  
тел: 02/964 18 20

[www.hartmann.bg](http://www.hartmann.bg)  
[www.ranite.bg](http://www.ranite.bg)

